




StimuLITE® 3-SONE Madrass Ekstra Myk

Optimal trykkavlastning for akutt og langsiktig omsorg

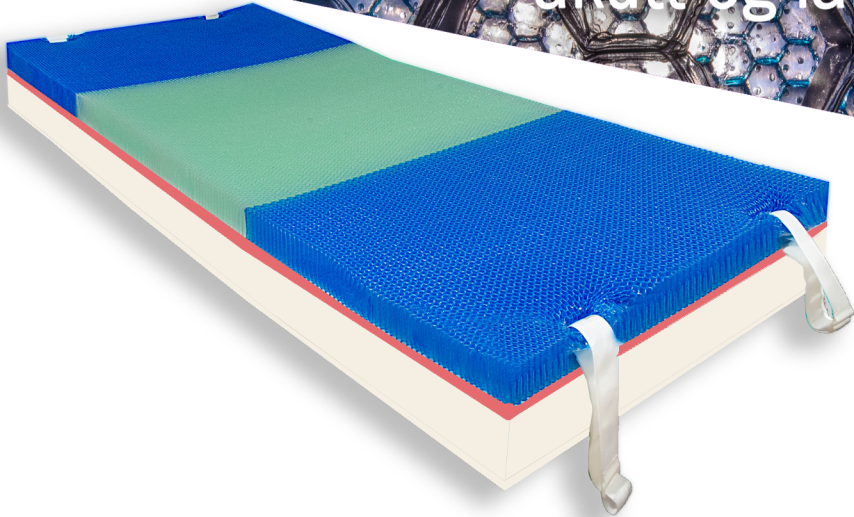



StimuLITE® 3-SONE Madrass Ekstra Myk: Optimal i hjemmet eller i omsorgen av trykksår opp til grad 3.

Nøkkelen til å forebygge trykksår er å sjekke følgende parametre:

Trykkavlastning: Sexkantcellerna fordeler trykket over et større område uten å øke trykket på utstikkende deler. **Redusere skjærkreftene:** Sexkantcellerna er anisotropisk dvs. bevegelig i alle retninger. Dette gjør at madrassen til å følge brukerens bevegelser. **Kontroll av varme og fuktighet.** Svette å passere gjennom de perforerte cellevegger uten å bli absorbert av materialet. Under brukerens bevegelse oppstår en luftstrøm a hjelpe till med å styre varme og fuktighet (mikroklima) av huden, tilsvarende definisjonen for Low Air Loss funksjon av dynamiske madrasser. Materialet kan vaskes og er anti-bakteriell og mugg-fri.

Madrassen er praktisk å ha hjemme eller i situationer uten konstant tilsyn som det er lett å flytte og lett å vedlikeholde. Madrassens overdel er vaskbar. Videre må du ingen strømforsyning eller vedlikehold av elektriske komponenter og batterier. Madrassens overdel har tre ulike soner med ulik hardhet. Hode- og fotenden er ca 40% mykere enn den sentrale delen. Madrassens underdel består av individuell formbare fjærer i polyeter miljøskum med ekstra myk fotdel for dig som trenger maksimal trykkavlastning og smertelindring under långtidig liggende.

Overmadrassen er laget av 100% termoplastisk polyuretan uten tilsetningsstoffer! Cellene består av tynne vegger av sexkantceller i bikubestruktur. Celleveggene er perforert. Perforering går hele veien gjennom. Disse perforerte celler tillater svette og væske kan passere gjennom madrassen selv under belastning uten at materialet tar opp noe av væsken. Væsken akkumulerer under madrassen, og brukeren er tørr og kjølig (beskyttelse av seng er tilgjengelig). Cellene er meget fleksibel og kan følge kroppen kurver, og utstikkende deler. Gjennom sin mobilitet hindrer cellene også skjær ved å bevege med kroppen. Cellene gi stabilitet i madrassen når du flytter inn og ut av sengen, og når du flytter rundt i sengen. Madrassen kommer i to sammensatte deler. Et basisparti og et topparti. Toppen kan anvendes som en overmadrass og basen er grunnen. Alt kommer i en bæreseske. Madrassen har evakueringsband. Dampgjennomtrenglig hygienetrek som passer runt hele madrassen medfølger. Trekket kan legges bare rundt basen for å beskytte skummaterialet hvis man ønsker å sove på vanlige laken.

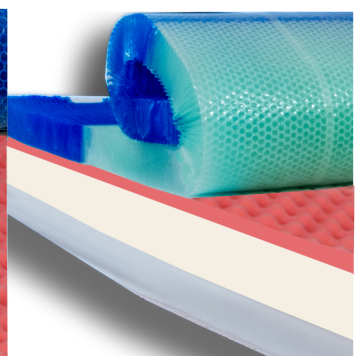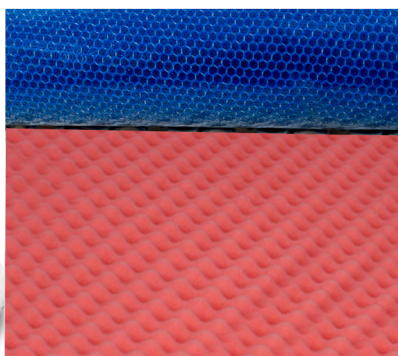



Artikkelnr	HMS Nr	Størrelse	Bekrivning
------------	--------	-----------	------------

StimuLITE® 3-SONE Madrass Ekstra Myk Brukervekt 25-180 kg

3ZON82B	230164	= 82,5 x 200 x 19 cm	GSR00056, FOUNDATION33, COVIN33BH, BAG
3ZON85B	230165	= 85 x 200 x 19 cm	GSR00067, FOUNDATION34, COVIN3480BH, BAG
3ZON90B	230166	= 90 x 200 x 19 cm	SRC00024, FOUNDATION36, COVIN3680BH, BAG

Reservdelar:

GSR00056	Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen	= 82,5 x 200 x 7 cm	StimuLITE® 3-SONE Overmadrass 82 cm, vikt 7 kg
GSR00067		= 85 x 200 x 7 cm	StimuLITE® 3-SONE Overmadrass 85 cm, vikt 7 kg
SRC00024		= 90 x 200 x 7 cm	StimuLITE® 3-SONE Overmadrass 90 cm, vikt 7 kg
FOUNDATION33		= 82,5 x 200 x 12 cm	Madrass basen ekstra myk 40-55kg/m3) 82 cm
FOUNDATION34		= 85 x 200 x 12 cm	Madrass basen ekstra myk 40-55kg/m3) 85 cm
FOUNDATION36		= 90 x 200 x 12 cm	Madrass basen ekstra myk 40-55kg/m3) 90 cm
COVIN3380BH		passer 3ZON82B	Inkotrekk, passer runt hele madrassen 82 cm
COVIN3480BH		passer 3ZON85B	Inkotrekk, passer runt hele madrassen 85 cm
COVIN3680BH		passer 3ZON90B	Inkotrekk, passer runt hele madrassen 90 cm
COVIN3380B		passer FOUNDATION33	Inkotrekk, passer runt skum basen 82 cm
COVIN3480B		passer FOUNDATION34	Inkotrekk, passer runt skum basen 85 cm
COVIN3680B		passer FOUNDATION36	Inkotrekk, passer runt skum basen 90 cm
LDBAGBED			Vaskepose till overmadrass, passer alle bredder
BAG			Bærkasse till overmadrass, passer alle bredder

Tillbehør:

COVST4080	230167	80-90 x 200 x 19 cm	Komforttrekk till StimuLITE® madrass bomull, 82 - 90 cm
HEEL-S	230168	10 x 22 x 27 cm	StimuLITE® Heelboot Hælbeskyttelse, Small, skostørrelse 35-41
HEEL-M	230169	11 x 24 x 33 cm	StimuLITE® Heelboot Hælbeskyttelse, Medium, skostørrelse 35-45
HEEL-L	230170	12 x 26 x 36 cm	StimuLITE® Heelboot Hælbeskyttelse, Large, skostørrelse 40-48
PILLOW	230171	49 x 38 x 9 cm	Ventillerende og trykkavlastende sengpute
SBS-1 90/60	230172	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-1 60 x 90 cm, åpne celler
SBS-1/48	230173	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-1 60 x 120 cm, åpne celler
SBS-2 90/60	230174	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-2 60 x 90 cm, film ene side
SBS-2/48	230175	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-2 60 x 120 cm, film ene side
SBS-3 90/60	230176	60 x 90 x 1,25 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-3 60 x 90 cm, stoff ene side
SBS-3/48	230177	60 x 120 x 1,25 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-3 60 x 120 cm, stoff ene side
SBS-4 90/60	230178	60 x 90 x 1,7 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-4 60 x 90 cm, film ene side
SBS-4/48	230179	60 x 120 x 1,7 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-4 60 x 120 cm, film ene side
SBS-5 90/60	230180	60 x 90 x 2,5 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-5 60 x 90 cm, film ene side
SBS-5/48	230181	60 x 120 x 2,5 cm	Trykkavlastende teppe StimuLITE® SBS-5 60 x 120 cm, film ene side
INMATT3227	230182	80 x 185 cm	Inko-/fuktoppsamlare, legges under overmadrass
COVIN3380	230183	82,5 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer runt overmadrass 82 cm
COVIN3480	230184	85 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer runt overmadrass 85 cm
COVIN3680	230185	90 x 200 x 7 cm	Inkotrekk, passer runt overmadrass 90 cm



GÖRAN SJÖDÉNS REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru Tel: +47 48 50 32 97

epost: ordre@rehabshop.com www.rehabshop.as



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.